

Electrode de terre


Ambu® Neuroline™ 714

FICHE TECHNIQUE

L'électrode de terre Ambu® Neuroline™ est une électrode de surface auto-adhésive et repositionnable de la gamme neurologie Ambu®, destinée à garantir le même potentiel électrique au niveau de l'amplificateur et du point de mesure lors d'un examen neurophysiologique des muscles et/ou des nerfs.

L'électrode de terre a une forme concave, avec une languette facilitant son retrait afin d'éviter de toucher la zone adhésive. Par conséquent, la même électrode peut être repositionnée plusieurs fois tout au long de l'examen.

L'électrode est dotée d'un support souple, confortable, doux et respirant, ainsi que d'un câble fin et flexible. Le câble a une longueur de 100 cm, ou 150 cm et est fourni avec un connecteur de 1,5 mm protégé contre le toucher accidentel.

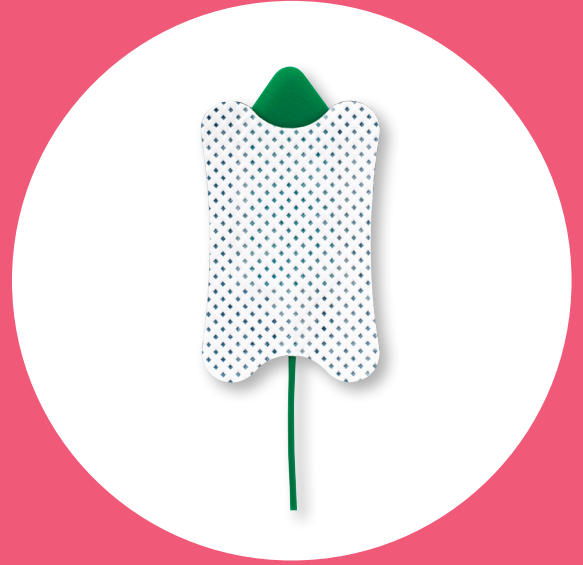

BÉNÉFICES CLÉS

Électrode à gel solide, auto-adhésive et repositionnable

Électrode à forme concave

Languette pour le retrait de l'électrode afin d'éviter de toucher la zone adhésive

Matériau du support flexible, confortable, doux et respirant

Câble fin et flexible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Examens neurophysiologiques des muscles et/ou des nerfs

Ambu

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Dimensions de l'électrode (max. L x l ou diamètre en mm)	48 x 30
Surface adhésive (en mm ²)	1240

Capteur

Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	1244

Environnement

Électrode sans latex de caoutchouc naturel
Câble sans latex de caoutchouc naturel
Emballage sans PVC

MATÉRIAUX

Électrode

Biocompatible	Oui
Support du capteur	Vinyle
Adhésif cutané	Hydrogel
Support externe	Polyester non tissé
Cœur de fil conducteur	Alliage de cuivre étamé
Isolation du fil conducteur	Polychlorure de vinyle (PVC)
Connecteur	Alliage de cuivre étamé/chlorure de polyvinyle (PVC)
Plaquette	Polytéréphtalate d'éthylène (PET)

Conditionnement

Sachets, couche intérieure	Polyéthylène (PE)
Sachets, couche centrale	Aluminium (Al)
Sachets, couche extérieure	Polytéréphtalate d'éthylène (PET)
Cartons	Carton


CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Référence	Longueur du câble	Couleur du câble	Durée de vie en mois (sachets scellés)	Conditionnement		
	cm			Quantité/ sachet	Quantité/boîte	Quantité/carton
71410-M/1	100	●	18	1	25	200
71415-M/1	150	●	18	1	25	200

71410-M/1 ● Produit ● Connecteur
● Longueur de câble ● Quantité par sachet



M = connecteur 1,5 mm

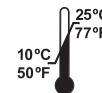

Température de stockage

Ambu

Ambu SARL

Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel Domergue
CS300800
33070 BORDEAUX
Tél : (33) 05 57 92 31 50
www.ambu.fr

