

FICHE TECHNIQUE

L'électrode cupule Ambu® Neuroline™ patient unique est conçue pour apporter un signal uniforme de haute qualité grâce à son capteur Argent/Chlorure d'argent. Une impédance faible minimise les bruits générés par l'électrode.

La cupule EEG est à usage unique afin de minimiser les risques de contamination bactérienne croisée et optimise le recueil des flux neuro-électriques.

Le pré-câblage avec code-couleur, permet une identification simplifiée de chaque cupule. Un orifice pratique de 2 mm complète chaque cupule, afin d'évacuer le gel conducteur en excès lors de la mise en place et de permettre l'insertion d'aiguilles.

L'électrode cupule Ambu® Neuroline™ est disponible en plusieurs configurations prêtes à l'emploi, permettant l'usage d'un seul pack adapté à chaque besoin.



BENEFICES CLES

Capteur Argent/Chlorure d'argent pour un signal uniforme de qualité

Pré-câblage avec connecteur souple

Câbles avec code couleur pour une identification facile

Orifice pratique de 2 mm pour l'évacuation du gel lors de la mise en place de l'électrode et l'insertion de l'aiguille

Cupules et câbles à usage unique, pour réduire les risques de contamination croisée


Utilisation possible avec la plupart des gels, pâtes et adhésifs

USAGES RECOMMANDES

Electroencéphalogramme (EEG)

Potentiels Evoqués (PE)

Polysomnographie (PSG)

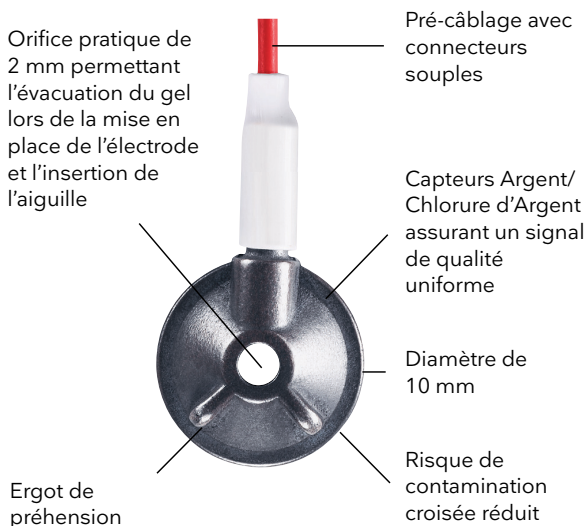

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Diamètre (en mm)	10
Hauteur (in mm)	3

Durée de conservation

Sachets non ouverts	24 mois*
---------------------	----------

Environnement

L'électrode ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Le câble connecteur ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Le packaging est sans PVC

*à partir de la date de production

MATERIAUX

Electrode

Capteur/Cupule	Polycarbonate (PC)/ABS/Argent/ Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Assemblage	Cuivre étamé/Polyéthylène (PE)
Type de connexion	1.5 mm et sécurisée
Centre du câble	Cuivre étamé
Isolation du câble	Polychlorure de Vinyle (PVC)
Connecteur du câble	Cuivre étamé/Polychlorure de Vinyle (PVC)

Emballage

Sachet, feuillet interne	Polyéthylène (PE)
Sachet, feuillet central	Aluminium (Al)
Sachet, feuillet externe	Papier
Boîte	Carton

Précautions

Usage patient unique

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Références	Longueur du câble	Couleur du câble***	Qté/sachet	Packaging	
	cm			Qté/boîte	Qté/carton
72610-M/10	100	① 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	460	920
72615-M/10	150				
72620-M/10	200				
72610-M/23**	100	② 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2	23	460	920

- 72610-M/10
- Produit
 - Longueur du câble
 - Connecteur
 - Qté par sachet

**Disponible en Belgique et Pays-Bas uniquement
***Le nombre représente la répétition des couleurs dans le paquet.



M = Connecteur 1.5 mm



12 couleurs de câble



Température de stockage

Ambu

Distribué par :
Ambu SARL
43-45 Rue d'Armagnac
CS 72073
33088 Bordeaux cedex
Tel.: (33) 05 57 92 31 50
www.ambu.fr

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
Ballerup
DK-2750 Denmark
T : + 45 72 25 20 00
www.ambu.com

Ambu BV
4 Rue de la Presse
1000 Bruxelles
Belgique
Tel.: +32 02 227 27 37
Fax: +32 02 218 31 41
www.ambubel.be

CE US: Rx Only

PUBPS-CORE-Sept.2022-002
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
Document réservé à l'usage des professionnels de santé.